

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FIRMA COMERCIAL: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.

DOMICILIO: Madrid, Ribera del Loira, 38 – Edif. 4 - Planta 1 – 28042 - TELEFONO: 901 10 11 42

### OBTRYX™ - SISTEMA DE CABESTRILLO TRANSOBTURADOR

**Descripción:** Aguja (dispositivo de introducción) + Malla Polipropileno monofilamento macroporo con bordes termosellados en la zona activa (suburetral).

El sistema de cabestrillo Obtryx es un sistema estéril de un solo uso compuesto por 2 dispositivos de administración (uno para el lateral derecho y otro para el lateral izquierdo) y una malla.

La malla se compone de una red de polipropileno protegida por un manguito desechable de plástico. En los extremos distales de la malla se encuentran unos lazos de asociación diseñados para estar colocados en el orificio de la aguja del extremo distal del dispositivo de administración.

El dispositivo de administración desechable está formado por un mango con una aguja de acero inoxidable.

La aguja está diseñada para facilitar el paso de la malla a través de los tejidos corporales para su ubicación a través del orificio del obturador.

El implante de malla se utiliza para como cabestrillo suburetral para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo producida por hipermovilidad o por deficiencia esfinteriana intrínseca. Técnica Quirúrgica : Transvaginal-transobturatriz-percutánea inguinal.

Facilita la ubicación (técnica fuera-dentro). Posible disminución de las lesiones uretrales (bordes termosellados)



Permite la separación in situ de la malla y la aguja. Facilita la liberación (malla libre). Este producto no contiene latex detectable.

**Composición:** POLIPROPILENO MONOFILAMENTO MACROPORO

**Método de esterilización:** El producto se suministra ESTÉRIL mediante óxido de etileno (OE)

**Envasado:** Caja de 1 unidad y de 5 unidades.

**Acreditaciones:** Clase IIb, TÜV Rheinland LGA Products Safety GmbH N° 0197

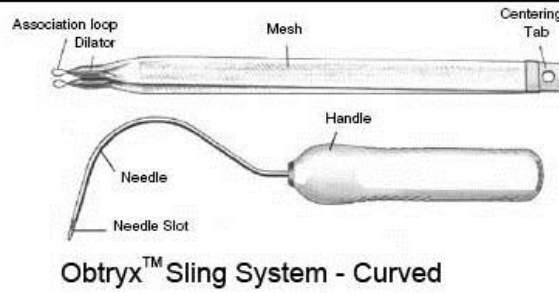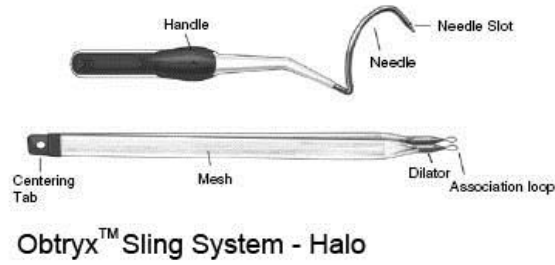

**ANEXO REFERENCIAS**

Ref. fabricante	Característica diferenciadora
M0068504000	<b>OBTRYX™ - SISTEMA DE CABESTRILLO TRANSOBTURADOR DE LA URETRA MEDIA - Aguja Curva; Unitaria</b>
M0068504001	<b>OBTRYX™ - SISTEMA DE CABESTRILLO TRANSOBTURADOR DE LA URETRA MEDIA - Aguja Curva; Caja de 5 unidades</b>
M0068505000	<b>OBTRYX™ - SISTEMA DE CABESTRILLO TRANSOBTURADOR DE LA URETRA MEDIA - Aguja Forma Helicoidal; Unitaria</b>
M0068505001	<b>OBTRYX™ - SISTEMA DE CABESTRILLO TRANSOBTURADOR DE LA URETRA MEDIA - Aguja Forma Helicoidal; Caja de 5 unidades</b>